

< HASP キーに登録されたアップグレード期間の確認手順 >

1.HASP Info の起動


HASP キーに登録されたアップグレード期間は HASP Info という Utility ソフトウェアの画面にて確認することができます。
HASP Info の起動方法には以下のように 2 つの方法があります。

(a) Windows のスタートメニューから起動する



Windows のスタートメニューから NIS-Elements の HASP Info を選択して起動します。


(b) NIS-Elements の Help から起動する

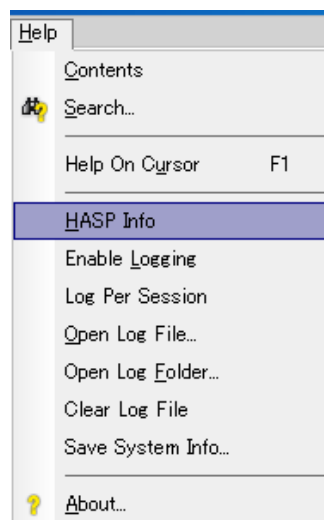

NIS-Elements を起動中に、NIS-Elements の Help メニューから HASP Info を選択して起動します。

2.アップグレード期間の確認

HASP Info 画面に表示される、アップグレード期間を以下の手順で確認します。

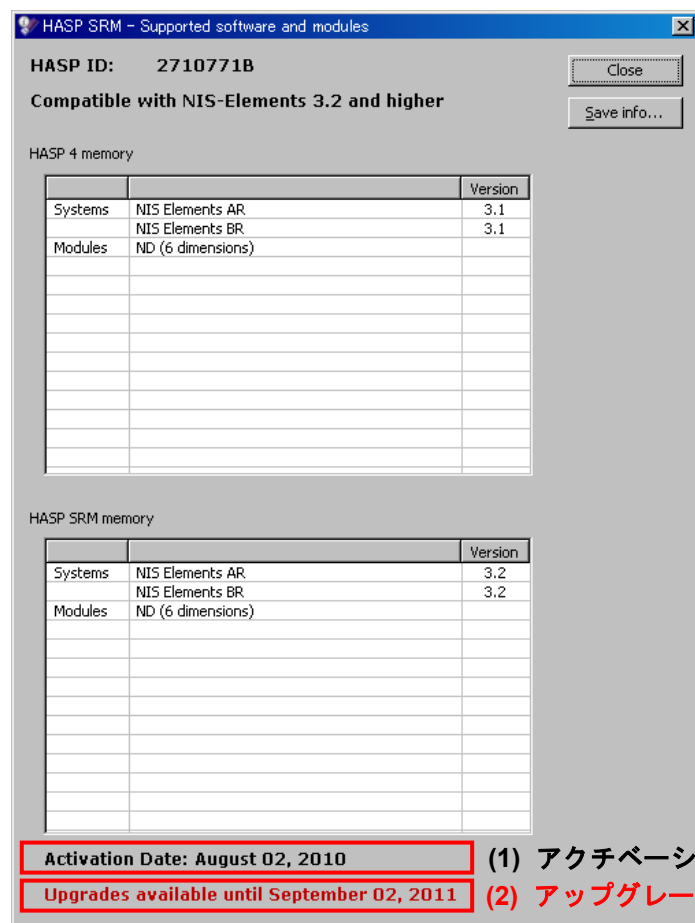

HASP Info 画面の下部には

- (1) アクチベーション日
 - (2) アップグレード期間
- の二つが表示されます。

NIS-Elements 各バージョンのリリース日^{*1} が、アップグレード期間に表示される日付よりも前の場合、そのバージョンにアップグレードすることが可能です。

また、リリース日がアップグレード期間に表示される日付より後の場合、そのバージョンにアップグレードするには、必要期間分の SUA オプションを購入して、アップグレード期間を延長する必要があります。

^{*1} : 各バージョンのリリース日は、Web 上 NIS-Elements のダウンロードコーナーでご確認頂けます。詳しくは、3.NIS-Elements のリリース日の確認をご覧ください。

(1) アクチベーション日

(2) アップグレード期間

3. NIS-Elements のリリース日の確認

NIS-Elements 各バージョンのリリース日は、NIS-Elements のダウンロードコーナーで確認することができます。下図の例では、赤枠で囲われた部分に表示されている日付が NIS-Elements のリリース日です。

画像統合ソフトウェア NIS-Elementsシリーズ


NIS-Elements AR Ver5.00.00 (64bit版)

リリース日	・ 2017/05/26
アップグレード有効期日	<ul style="list-style-type: none">・ V5.00.00にアップグレードするためには、アップグレード有効期日が "2017年05月24日以降" であることが必要です。・ アップグレード有効期日は、Hasp Infoで確認することができます。・ 詳しくは、"HASPキーに登録されたアップグレード有効期日の確認手順"をご覧ください。 (PDF:244KB)
ファイルサイズ	・ 1.31GB
対応OS	<ul style="list-style-type: none">・ Windows® 10 Pro 64bit(英語版/日本語版)・ Windows® 7 Professional SP1 (英語版/日本語版) <p>* V4.00からWindows® XPおよびWindows® Vistaは非対応となりました。</p>

まとめ


以下の図は、HASP キーに登録されたアップグレード期間、リリース日、SUA オプションの購入についてのまとめです。

HASPキーに登録されたアップグレード期間
がNIS-Elementsのリリース日より前の場合

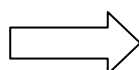

アップグレードするために SUA オプションのご購入が必要です

HASP キーに登録されたアップグレード期間
がNIS-Elements のリリース日と同日もしくは
後の場合

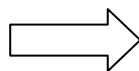

無償でアップグレードできます